



Optimizado

La cámara de 24 litros y el portabandejas con 5 bandejas incluidas garantizan una capacidad de carga óptima en un espacio mínimo. El portabandejas también permite incorporar hasta 3 casetes de 1 DIN y 3 casetes de 1/4 DIN por carga.



Fiable

Los sistemas de control Euronda Pro System garantizan la durabilidad, la fiabilidad y la seguridad del proceso, a la vez que reducen el consumo de agua y energía.



Trazable

Además de la tarjeta SD, disponible de serie en E8, se puede elegir entre 2 impresoras internas diferentes: una para papel térmico y otra para etiquetas adhesivas. Las dos impresoras se pueden instalar en la parte frontal del autoclave en unos sencillos pasos.



Resistente

Todos los materiales, componentes y acabados están diseñados para durar mucho tiempo. Cada detalle está pensado para ofrecer un autoclave resistente que pueda afrontar el ritmo de trabajo de cualquier clínica.

Capacidad de carga

La carga máxima de E8 de 24 litros es de 6 kg para productos sólidos embolsados. E8 ofrece 4 soluciones para optimizar la carga que se debe esterilizar en función de las diferentes necesidades: el portabandejas estándar que incluye 5 bandejas suministradas con el autoclave y 3 portabandejas opcionales.

Portabandejas estándar


Portabandejas de acero de forma cuadrada concebido para la introducción de 5 bandejas estándar de aluminio. Al girarlo 90°, permite colocar 3 filas de casetes embolsados. 5 bandejas incluidas.



Dimensiones

Portabandejas: 19,5 x 19,5 x 40 cm (l x al. x an.)

Bandeja: 18,5 x 2 x 38 cm (l x al. x an.)

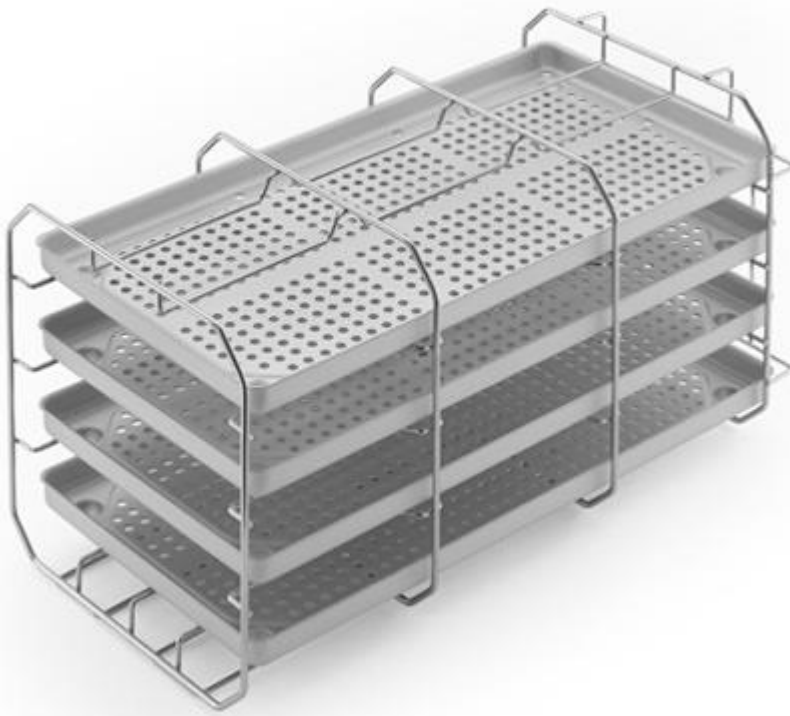

E-Memory

E-Memory es el software para el almacenamiento, la gestión y la trazabilidad completa de todos los ciclos y datos de esterilización directamente en el ordenador. Esta aplicación puede obtener de forma automática, semiautomática o manual datos sobre el proceso de esterilización y guardarlos directamente en el ordenador. Estos datos se pueden organizar, buscar, imprimir y enviar por correo electrónico fácilmente.

E8

Euronda | Pro System



